


Hill-Rom®  
Electric Stretcher

NEW

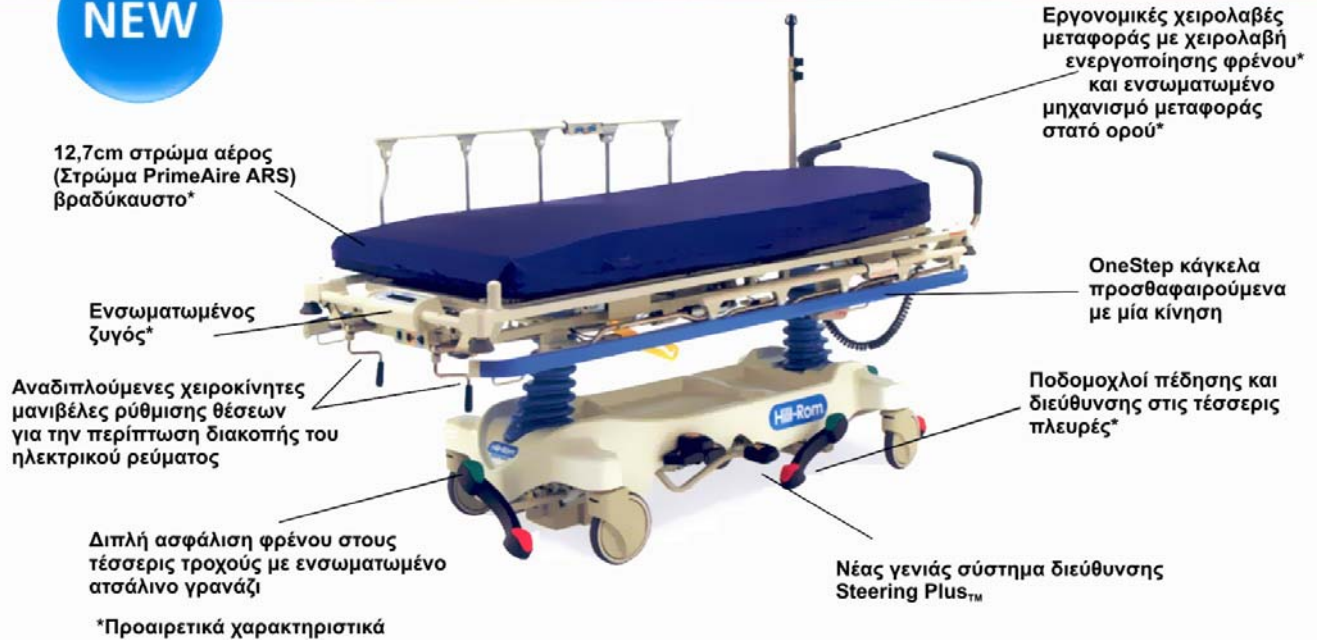

## Electric Stretcher – Ηλεκτρικό Φορείο

### Με μία ματιά

Νέο φορείο Hill-Rom, χαρακτηριστικά:

- **Αποδοχή βάρους έως 317,5 kg .**
- **Ενσωματωμένος ζυγός** ο οποίος απεικονίζει κιλά και λίβρες ταυτόχρονα.
- **Χαμηλό ύψος 52,6 cm** για πιο ασφαλή είσοδο και έξοδο από το φορείο.
- **12,7 cm αερόστρωμα (PrimeAire ARS®)** για ανακουφισμένους ασθενείς - το πρώτο μη ηλεκτρικό αερόστρωμα για φορείο.
- **Ενεργό φρένο χειρός** – το πρώτο ανά τον κόσμο φρένο χειρός που σας βοηθά να ξεπερνάτε ράμπες και γωνίες εύκολα χωρίς να απαιτείται να χρησιμοποιείτε το βάρος του σώματός σας ως αντιστάθμιση και να σταματάτε εύκολα και με ασφάλεια.
- **Ενσωματωμένος μηχανισμός μεταφοράς στατώ ορού** που διευκολύνει τη μεταφορά του φορείου και του φορητού στατώ ορού.
- **Σύστημα νέας γενιάς διεύθυνσης Steering Plus™** για κλειστές γωνίες και έλεγχο
- **Διπλή ασφάλιση φρένου στους τέσσερις τροχούς** για μία δυνατή και σταθερή πλατφόρμα.
- **Τρία χρόνια εγγύηση** για τα μέρη του φορείου και εγγύηση εφ' όρου ζωής για τον σκελετό.

### ΝΕΟ ΦΟΡΕΙΟ HILL-ROM PROCEDURAL

Το ηλεκτρικό φορείο Electric (P8020) της Hill-Rom είναι μεγάλης αντοχής και συνδυάζει την άνεση μιας νοσοκομειακής κλίνης και την δυνατότητα μεταφοράς ενός φορείου. Το φορείο προσφέρει μοναδική ασφάλεια, άνεση και ποιότητα.

**Ευκινησία:** Δυσκολία στο χειρισμό και στην ακινητοποίηση? Η προαιρετική χειρολαβή ενεργοποίησης φρένου διευκολύνει κατά την μεταφορά σε ράμπες και στα απότομα - ξαφνικά φρεναρίσματα. Ο ενσωματωμένος μηχανισμός μεταφοράς στατώ ορού σας βοηθά κατά τη μεταφορά του φορείου και του στατώ ορού. Το σύστημα νέας γενιάς διεύθυνσης Steering Plus™ επιτρέπει τον πλήρη έλεγχο κατά τη μεταφορά και την εύκολη μεταφορά του φορείου στις κλειστές γωνίες.

**Άνεση:** Τα χειριστήρια στα πλευρικά προστατευτικά κάγκελα επιτρέπουν στον ασθενή να ρυθμίσουν ηλεκτρικά το φορείο για μεγαλύτερη άνεση. Το βραδύκαυστο αερόστρωμα 12,7 cm (PrimeAire ARS®) είναι το πρώτο μη ηλεκτρικό αερόστρωμα για φορείο που βελτιώνει την άνεση του ασθενούς.

**Ποιότητα:** Ο ενισχυμένος σκελετός είναι κατασκευασμένος από μεγάλο πάχους χάλυβα, βαρέως τύπου, για ποιότητα μακράς διάρκειας και ικανός να δεχθεί βάρος 317,5 kg ώστε να επιδέχεται και να διαχειρίζεται ασθενείς με νοσηρή παχυσαρκία. Χειρολαβές μεταφοράς, στατώ ορού, κάγκελα και άλλα μέρη του φορείου από νικέλιο για μεγάλη αντίσταση στη οξείδωση ακόμη και στις πιο αντίξοες συνθήκες.

## Hill-Rom® Electric Stretcher – Ηλεκτρικό

➤ Χαρακτηριστικά	Βασικά Χαρακτηριστικά	Προαιρετικά Χαρακτηριστικά
Αποδοχή βάρους 317,5 kg	•	
Ενσωματωμένος ζυγός έγχρωμης απεικόνισης		•
12,7 cm αερόστρωμα PrimeAire® Air Reflex™ (ARS) βραδύκαυστο.		•
Ενεργό φρένου χειρός		•
Ενσωματωμένος μηχανισμός μεταφοράς στατό		•
Ποδ/χλοί πέδησης /κατεύθυνσης – κεφάλι και πόδια	•	
Ποδ/χλοί πέδησης /κατεύθυνσης–και στις 4 πλευρές		•
Σύστημα νέας γενιάς κατεύθυνσης Steering Plus™	•	
Εργονομικές χειρολαβές μεταφοράς		•
Μόνιμο στατό ορού – 3 θέσεων		•
Πλάτος επιφάνειας κατάκλισης 76,20cm	•	
Χειροκίνητη ανάκλιση γονάτων	•	
Σύστημα πλευρικών προστατευτικών κάγκελων	<b>Προσθαφαιρούμενα</b>	
Ακτινοδιαπερατή επιφάνεια κατάκλισης		•
10,2cm υψηλής πυκνότητας αφρώδες στρώμα βραδύκα.	•	
12,7 Comfortline® αφρώδες στρώμα πολλαπλών πυκνοτήτων βραδύκαυστο		•
Χρώμα προσκρουστήρων – επιλογή μεταξύ ουδέτερου, μπλε, κόκκινου, πετρόλ ή πορφυρό.	<b>Κατ' επιλογή</b>	

### ➤ Παρελκόμενα

- Μαξιλάρι φορείου
- Μεταφορέας στατό
- Τραπεζίδιο ασθενούς
- Τραπεζίδιο αντικειμένων
- Υποδοχή φιάλης οξυγόνου
- Υποδοχή φιάλης υγρού O<sub>2</sub>
- Σύστημα υποδοχών εγχύσεων
- Καλύμματα κάγκελων
- Προέκταση βραχίονα
- Προσθ/μενη μετώπη ποδιών
- Κάθετη υποδοχή κασέτας x-ray
- Διαγραμματοθήκη
- Μετατρέπομενη μετώπη ποδιών
- Στατό ορού
- Αναβολέας αστραγάλων
- Ιμάντες μεταφοράς
- Προέκταση ποδιών
- Υποδοχή ρολού χαρτιού

### ➤ Τεχνικά Χαρακτηριστικά

- Μέγιστο βάρους .....317,5 kg
- Ελάχιστο ύψος – από το δάπεδο έως την επιφάνεια κατάκλισης: .....57,2 cm με ζυγό 56,6 cm
- Μέγιστο ύψος – από το δάπεδο έως την επιφάνεια κατάκλισης: .....87,1 cm με ζυγό 86,4 cm
- Συνολικό μήκος.....210,8 cm
- Συνολικό πλάτος (ανεβασμένα τα κάγκελα)..... ή 91,4 cm
- Συνολικό πλάτος (με αποθηκ/να τα κάγκελα)..... 76,8 cm
- Μήκος κάγκελων.....119,4 cm
- Ύψος πλευρικών προστατευτικών επάνω από την επιφάνεια /στρώμα.....36,58 cm
- Διαστάσεις Στρώματος:..... 76,2cm x 190,5 cm
- Μέγιστη ανάκλιση πλάτης..90°
- Μέγιστο Trend./Rev.Trend 18°
- Απόσταση από το δάπεδο στη βάση.....8,9 cm
- Διάσταση τροχών.....20,3 cm



**Ενσωματωμένος Ζυγός**



**12,7cm Στρώμα Αέρος PrimeAire ARS**




**Ενεργό Φρένο Χειρός**



**Ενσωματωμένος Μηχανισμός Μεταφοράς Στατό Ορού**



**Χειριστήρια Ασθενή**

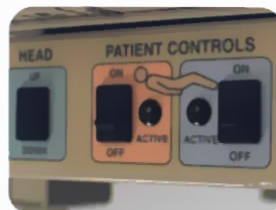

**Πίνακας ελέγχου νοσηλευτικού προσωπικού**