

Άνεση με Ασφάλεια




Στρώμα και επίστρωμα Αέρος Hill-Rom P280

Hill-Rom

Βελτιώνει τα Αποτελέσματα για Ασθενείς και Νοσηλευτές™

Hill-Rom® P280: Καλά νέα για το περιβάλλον σας Safe Skin™

Σε ευθυγράμμιση με τους συμβουλευτικούς οργανισμούς για τις κατακλίσεις του 2009 NPUAP/EPUAP (National Pressure Ulcer Advisory Panel / European Pressure Ulcer Advisory Panel), η Hill-Rom παρέχει προϊόντα και θεραπείες ύψιστης ποιότητας διασφαλίζοντας τις απαραίτητες μετρήσεις για ένα περιβάλλον Safe Skin™ για τον ασθενή σας.

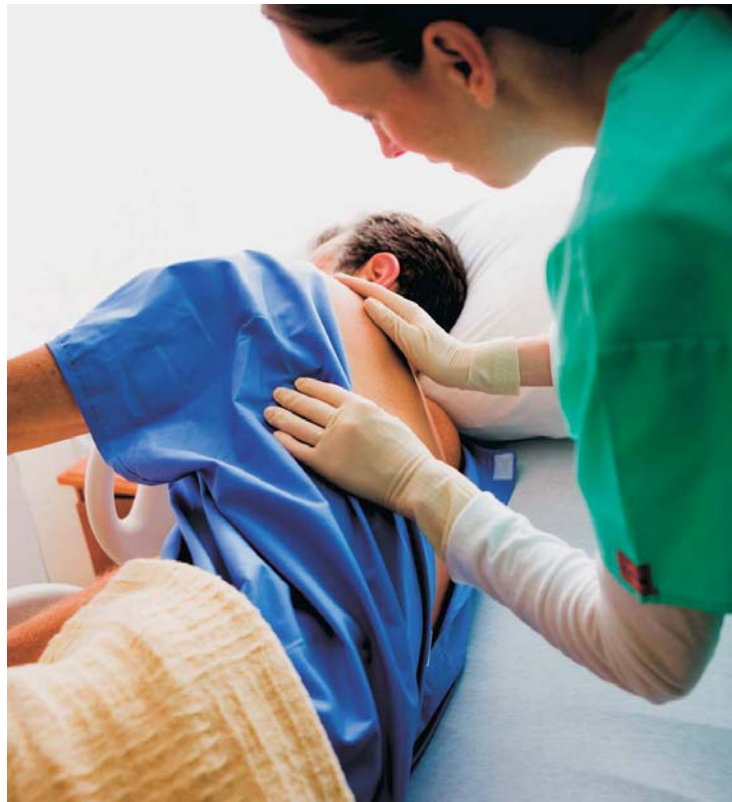

Το επίστρωμα Hill-Rom P280 είναι εύκολο στη χρήση του:



Απλά ξεδιπλώστε και ασφαλίστε το P280 στην επιφάνεια του στρώματος...



βάλτε στη πρίζα και ενεργοποιήστε την μονάδα ελέγχου...



και σκεπάστε το επίστρωμα με ένα σεντόνι – το P280 είναι έτοιμο για χρήση!




Αποτέλεσμα: Άνεση με Safe Skin™ για τον ασθενή σας


Η πρόληψη των κατακλίσεων για τους ασθενείς σας σε ρίσκο τώρα έγινε ενδεικτικά ευκολότερη.

Η Θεραπεία I-mmersion™ της Hill-Rom χρησιμοποιώντας το 3-Ζωνών Επίστρωμα Αέρος P280

- βοηθά στην μείωση εξάπλωσης και συχνότητας εμφάνισης των κατακλίσεων χρησιμοποιώντας εναλλασσόμενη χαμηλή ανακατανομή πίεσης και τη κατάλληλη εμφύθιση
- ανταποκρίνεται στις ανάγκες του κάθε ασθενή ξεχωριστά μέσω της ευελιξίας επιλογής θεραπειών (εναλλασσόμενης ή συνεχόμενης χαμηλής πίεσης)
- παρέχει αποτελεσματική πρόληψη και θεραπεία κατακλίσεων
- διασφαλίζει εναλλασσόμενη χαμηλή πίεση χρησιμοποιώντας υψηλής άνεσης αεροκυψέλες πολυουρεθάνης.
- βελτιώνει την άνεση του ασθενή με ρυθμιζόμενους χρονικά κύκλους και επιλογή για σκληρότερη ή μαλακότερη επιφάνεια
- βελτιώνει την ασφάλεια ασθενών και προσωπικού μέσω των λειτουργιών αυτόματου κλειδώματος, συναγερμών ασφαλείας και εύκολης μεταφοράς που διαθέτει
- υποστηρίζει την κινητικότητα του ασθενή

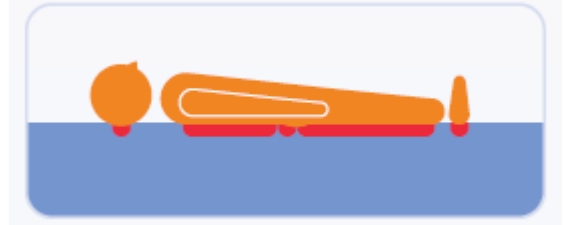

Μία δυσπροσάρμοστη εμφύθιση κατανέμει υψηλή πίεση στον ιστό.

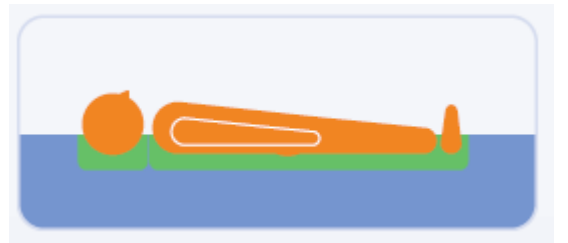

Η θεραπεία εμφύθισης I-mmersion™ της Hill-Rom ανακατανέμει την πίεση σε μια μεγαλύτερη επιφάνεια, μειώνοντας σημαντικά την συμπίεση του ευάλωτου ιστού.

«Χρησιμοποιήστε μία ενεργή επιφάνεια υποστήριξης (επίστρωμα ή στρώμα) για ασθενείς με υψηλό ρίσκο εμφάνισης ελκών κατάκλισης όπου η συχνή χειροκίνητη επανατοποθέτηση δεν είναι δυνατή.»
EPUAP/NPUAP Consensus 2009



**Άνεση με ασφάλεια:
Hill-Rom P280**

Αποδοτικά κλινικά αποτελέσματα στην πρόληψη των κατακλίσεων για ασθενείς σε ρίσκο με τη χρήση του στρώματος Hill-Rom P280

Τρεις Ζώνες: Στατική ζώνη κεφαλής, εναλλασσόμενη χαμηλής ή συνεχόμενης χαμηλής πίεσης ζώνη κόκκυγα, ειδικά κεκλιμένη ζώνη αέρος φτερνών 5°

Σε αντίθεση με τα συνήθη στρώματα το P280 παρέχει διαφορετικές ζώνες για να επιληφθεί τις διαφορετικές ανάγκες των εύλωτων περιοχών του ασθενή.

P-max

Μια σκληρή επιφάνεια στη ζώνη κόκκυγα βοηθά στη διαχείριση κινητοποίησης του ασθενή και στην έγερση αυτού από την κλίνη.

Εύκολο CPR

Με το επίστρωμα αέρος Hill-Rom P280 οι νοσηλευτές απλά πρέπει να αποσυνδέσουν τον σωλήνα σύνδεσης από την μονάδα ελέγχου για να επιφέρουν γρήγορα CPR.

Συναγερμένοι ασφαλείας

Οι νοσηλευτές ενημερώνονται για οποιαδήποτε δυσλειτουργία.

Ρυθμιζόμενος χρονικά εναλλασσόμενος κύκλος και ρυθμίσεις άνεσης

Ο χρόνος του κύκλου μπορεί να ρυθμιστεί για να προσαρμοστεί στην κλινική κατάσταση του ασθενή και να παρέχει αυξημένη άνεση κατά τη διάρκεια ύπνου. Οι ρυθμίσεις άνεσης βοηθούν στην ρύθμιση μιας σκληρότερης ή απαλότερης επιφάνειας κατά τις προτιμήσεις του ασθενή.

Αυτόματο Κλείδωμα

Αυτό το χαρακτηριστικό ασφαλείας βοηθά στη διατήρηση των ρυθμίσεων του στρώματος αναλλοίωτα αποτρέποντας την ακούσια αλλαγή αυτών.

360° προσθαφαιρούμενο κάλυμμα με συγκολλημένες ραφές

Δεν επιτρέπει την εισροή υγρών στο στρώμα και το χαρακτηριστικό της προσθαφαίρεσης διευκολύνει τον καθαρισμό και την συντήρησή.

Λειτουργία μεταφοράς για 10 ώρες

Βοηθά τους νοσηλευτές στο καθημερινό τους έργο: Η στατική λειτουργία διασφαλίζει την υποστήριξη του ασθενούς κατά τη μεταφορά του στο ακτινολογικό ή σε άλλα τμήματα.

Χειροκίνητα ρυθμιζόμενο σε πέντε λειτουργίες

Ανακατανομή πίεσης παρέχεται με την λειτουργία εναλλασσόμενης χαμηλής πίεσης και την λειτουργία συνεχόμενης χαμηλής πίεσης με ρυθμιζόμενους χρονικά κύκλους ανάλογα με την κλινική κατάσταση του ασθενή συμβάλλοντας ταυτόχρονα στην άνεσή του.

Οι ρυθμίσεις άνεσης βοηθούν στην ρύθμιση μιας σκληρότερης ή απαλότερης επιφάνειας ανάλογα των προτιμήσεων του ασθενή. Η λειτουργία υπερπλήρωσης στην καθιστή θέση βοηθά στην κινητοποίηση. Η λειτουργία P-max διευκολύνει το έργο των νοσηλευτών.

Τεχνικές Προδιαγραφές

Επίστρωμα

Μήκος.....203 cm
Πλάτος.....90cm
Ύψος.....10cm
Βάρος.....±7,8kg
Μέγιστο βάρος ασθενούς.....140kg
Ελάχιστο βάρος ασθενούς.....30kg

Κάλυμμα: Πολυουρεθάνη

Στρώμα

Top: Μήκος : 203cm / Πλάτος: 90 cm
Βάση: Μήκος: 198cm / Πλάτος: 85 cm
Ύψος: 17 cm
Βάρος: 11,9kg

Μονάδα Ελέγχου

Μήκος.....29,1 cm
Πλάτος.....20cm
Ύψος.....11,7cm
Βάρος.....2,2kg
Επίπεδο θορύβου.....< 45 dB (A)

Τροφοδοσία Ρεύματος:

AC220-240 V, 50Hz, AC120 V, 50+60Hz

Κατανάλωση: 9,64 W (220-240V, 50 Hz)
8,46 W (120V, 60 Hz)
10,28 W (120V, 50 Hz)

CE 0459 93/42/EEC
Συμμόρφωση με τα πρότυπα
EN IEC 60601-1
EN IEC 60601-1-2
EN ISO 13485