

ΤΡΑΠΕΖΟΤΟΥΑΛΕΤΑ ΤΑ 529 F, ΤΑ 529 G, ΤΑ 529 Η, ΤΑ 529 Ι




Η εργονομικά σχεδιασμένη τραπεζοτουαλέτα της Hill-Rom βελτιώνει της συνθήκες εργασίας των νοσηλευτών. Είναι συμβατή με τα έπιπλα των θαλάμων νοσηλείας, ιδανική για τους ασθενείς και τους νοσηλευτές.

- Η βάση σε σχήμα-U παρέχει συμβατότητα με όλα τα έπιπλα των θαλάμων νοσηλείας
- Άνετο τραπέζι
- Εύκολη στην χρήση της αυξομείωση ύψους τραπεζοτουαλέτας
- Επιλογή χρωμάτων.



Ο σχεδιασμός του τραπεζιδίου επιτρέπει στον ασθενή την άνετη πρόσβαση στον μοχλό αυξομείωσης ύψους της τραπεζοτουαλέτας

Το τραπέζιο TA529 είναι συμβατό με όλα τα έπιπλα ενός θαλάμου νοσηλείας

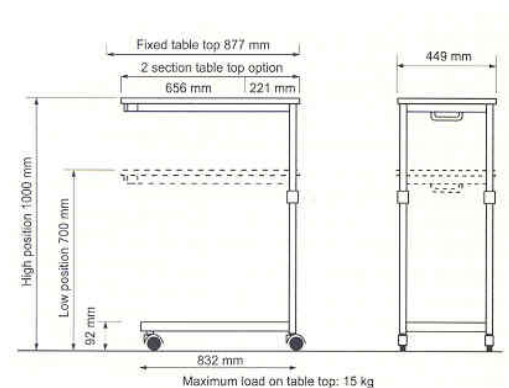

Βάση:

Σχήματος – U, σωλήνα χαλύβδινο βαμμένο με ειδική εποξική βαφή διαμέτρου 32mm, 4 διπλές ρόδες. Δύο κατακόρυφοι σωλήνες διαμέτρου 36mm και 25mm με πολλαπλών θέσεων αυτόματο σύστημα ρύθμισης ύψους και δακτυλίους οι οποίοι διασφαλίζουν την σταθερότητα της.

Τραπέζιο:

Τραπέζι πάχους 18mm από υλικό laminate ή ξύλινο με τελειώματα από υλικό laminate. Μπεζ προστατευτικά (eroxy). Μπεζ πλαστικό στοπ (stop). Το τραπέζι στηρίζεται σε δύο επίπεδους σωλήνες 15 x 30 mm (eroxy).



<p>Τραπεζοτουαλέτα ΤΑ 529 F: 1 σταθερό τμήμα – τραπέζι από υλικό laminate</p>	<p>Τραπεζοτουαλέτα ΤΑ 529 G: Τραπέζι δύο τμημάτων από υλικό laminate, το ένα με ανάκλιση θέσης αναλογίου (για διάβασμα)</p>	<p>Τραπεζοτουαλέτα ΤΑ 529 Η: 1 σταθερό τμήμα – τραπέζι από ξύλο με τελειώματα laminate</p>	<p>Τραπεζοτουαλέτα ΤΑ 529 Ι: Τραπέζι δύο τμημάτων από ξύλο με τελειώματα laminate, το ένα με ανάκλιση θέσης αναλογίου (για διάβασμα)</p>
--	--	---	---