


## Hill-Rom® Trauma Stretcher

**NEW**

Ενσωματωμένος ζυγός\*

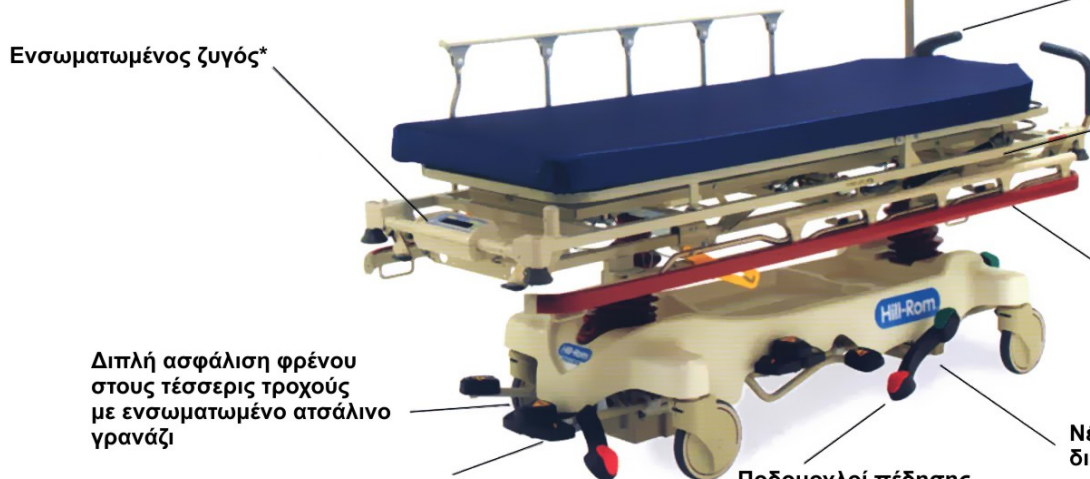

Διπλή ασφάλιση φρένου στους τέσσερις τροχούς με ενσωματωμένο αστάλινο γρανάζι

Υδραυλικοί ποδομοχλοί στο τμήμα ποδιών\*

Ποδομοχλοί πέδησης και φρένου στις τέσσερις πλευρές\*

Εργονομικές χειρολαβές μεταφοράς με χειρολαβή ενεργοποίησης φρένου\* και ενσωματωμένο μηχανισμό μεταφοράς στατό ορού\*

Υποδοχή κασέτας ακτινογραφιών καθ' όλο το μήκος του φορείου κάτω από την επιφάνεια κατάκλισης



OneStep κάγκελα προσθαιρούμενα με μία κίνηση

Νέας γενιάς σύστημα διεύθυνσης Steering Plus™

\* Προαιρετικά χαρακτηριστικά

### Trauma Stretcher – Φορείο Τραυματία

#### Με μία ματιά

Νέο φορείο Hill-Rom, χαρακτηριστικά:

- Αποδοχή βάρους έως 317,5 kg .
- Ενσωματωμένος ζυγός ο οποίος απεικονίζει κιλά και λίβρες ταυτόχρονα.
- Επιφάνεια φορείου που επιδέχεται σ' όλο το μήκος της όλα τα συμβατικά συστήματα ακτινογραφιών και κασετών ακτινογραφίας.
- Υποδοχή κατακόρυφης κασέτας ακτινογραφιών στήθους.
- Ενεργό φρένο χειρός – το πρώτο ανά τον κόσμο φρένο χειρός που σας βοηθά να ξεπερνάτε ράμπες και γωνίες εύκολα χωρίς να απαιτείται να χρησιμοποιείτε το βάρος του σώματός σας ως αντιστάθμιση και να σταματάτε εύκολα και με ασφάλεια.
- Ενσωματωμένος μηχανισμός μεταφοράς στατό ορού που διευκολύνει τη μεταφορά και ελιγμό του φορείου και του φορητού στατό ορού.
- Σύστημα νέας γενιάς διεύθυνσης Steering Plus™ για κλειστές γωνίες και έλεγχο
- Διπλή ασφάλιση φρένου στους τέσσερις τροχούς για μία δυνατή και σταθερή πλατφόρμα.
- Πλένεται υπό πίεση
- Τρία χρόνια εγγύηση για τα μέρη του φορείου και εγγύηση εφ' όρου ζωής για τον σκελετό.

#### ΝΕΟ ΦΟΡΕΙΟ HILL-ROM TRAUMA

Με άμεση και εύκολη πρόσβαση στον ασθενή το φορείο Trauma της Hill-Rom είναι ιδανικό για χρήση στα επείγοντα και έκτακτα περιστατικά. Το φορείο προσφέρει μοναδική κινητικότητα, εξυπηρέτηση και ποιότητα.

**Κινητικότητα:** Προς τι η ταλαιπωρία κατά την διεύθυνση και πέδηση? Η προαιρετική χειρολαβή ενεργοποίησης φρένου διευκολύνει κατά την μεταφορά σε ράμπες και στα απότομα - ξαφνικά φρεναρίσματα.

**Εξυπηρέτηση:** Η δυνατότητα του φορείου λήψης ακτινογραφιών από την κεφαλή έως τα πόδια εξοικονομεί χρόνο και μειώνει το ρίσκο τραυματισμών. Η επιφάνεια κατάκλισης του φορείου επιδέχεται καθ' όλο το μήκος της όλες τις συμβατικές κασέτες ακτινογραφιών. Υποδοχές για σακούλες παροχέτευσης και σωλήνες αναρρόφησης εντοπίζονται και στις τέσσερις γωνίες του φορείου.

**Ποιότητα:** Ο ενισχυμένος σκελετός είναι κατασκευασμένος από μεγάλο πάχους, αυτοκινητικής βαθμίδας χάλυβα για ποιότητα μακράς διάρκειας και ικανός να δεχθεί βάρος 317,5 kg ώστε να επιδέχεται και να διαχειρίζεται ασθενείς με νοσηρή παχυσαρκία ακόμη και στις πιο αντίξοες συνθήκες. Χειρολαβές μεταφοράς, στατό ορού, κάγκελα και άλλα μέρη του φορείου από νικέλιο για μεγάλη αντίσταση στη οξείδωση ακόμη και στις πιο αντίξοες συνθήκες.

## Hill-Rom®

### Trauma Stretcher – Φορείο Τραυματία

➤ Χαρακτηριστικά	Βασικά Χαρακτηριστικά	Προαιρετικά Χαρακτηριστικά
Αποδοχή βάρους 317,5 kg	•	
Ενσωματωμένος ζυγός		•
Ενεργό φρένο χειρός		•
Ενσωματωμένος μηχανισμός μεταφοράς στατό		•
Ποδ/χλοί πέδησης /κατεύθυνσης – κεφάλι και πόδια	•	
Ποδ/χλοί πέδησης /κατεύθυνσης – και στις 4 πλευρές		•
Σύστημα νέας γενιάς κατεύθυνσης Steerring Plus™	•	
Λήψη ακτινογραφιών καθ' όλο το μήκος	•	
Εργονομικές χειρολαβές μεταφοράς		•
Μόνιμο στατό ορόυ – 3 άγκιστρα		•
Πλάτος επιφάνειας κατάκλισης 66cm	•	
Υδραυλικοί ποδ/χλοί αυξομείωσης ύψους στα πόδια		•
Σύστημα πλευρικών προστατευτικών κάγκελων	<b>Προσθαφαιρούμενα</b>	
Ακτινοδιαπερατή επιφάνεια κατάκλισης		•
7,6cm υψηλής πυκνότητας αφρώδες στρώμα βραδύκαυστο	•	
10,2cm υψηλής πυκνότητας αφρώδες στρώμα βραδύκαυστο		•
12,7 Comfortline® αφρώδες στρώμα πολλαπλών πυκνοτήτων βραδύκαυστο		•
Χρώμα προσκρουστήρων – επιλογή μεταξύ ουδέτερου, μπλε, κόκκινου, πετρώλ ή πορφυρό.	<b>Κατ' επιλογή</b>	

#### ➤ Παρελκόμενα

- Μαξιλάρι φορείου
- Μεταφορέας στατό
- Τραπεζίδιο ασθενούς
- Τραπεζίδιο αντικειμένων
- Υποδοχή φιάλης οξυγόνου
- Υποδοχή φιάλης υγρού O<sub>2</sub>
- Σύστημα υποδοχών εγχύσεων
- Καλύμματα κάγκελων
- Προέκταση βραχίονα
- Προσθ/μενη μετώπη ποδιών
- Κάθετη υποδοχή κασέτας x-ray
- Διαγραμματοθήκη
- Μετατρεπόμενη μετώπη ποδιών
- Στατό ορόυ
- Αναβολέας αστραγάλων
- Ιμάντες μεταφοράς
- Προέκταση ποδιών
- Υποδοχή ρολού χαρτιού

#### ➤ Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Μέγιστο βάρους .....317,5 kg

Ελάχιστο ύψος – από το δάπεδο έως την επιφάνεια κατάκλισης:  
.....61,6 cm  
.....με ζυγό 61 cm

Μέγιστο ύψος – από το δάπεδο έως την επιφάνεια κατάκλισης:  
.....95,9 cm  
.....με ζυγό 95,3 cm

Συνολικό μήκος.....210,8 cm

Συνολικό πλάτος (με ανεβασμένα τα κάγκελα).....91,4 cm

Συνολικό πλάτος (με αποθηκ/να τα κάγκελα).....76,8 cm

Μήκος κάγκελων.....119,4 cm

Ύψος πλευρικών προστατευτικών επάνω από την επιφάνεια /στρώμα.....36,8 cm

Διαστάσεις Στρώματος:  
.....66cm x 190,5 cm

Μέγιστη ανάκλιση πλάτης.....90°

Μέγιστο Trend./Rev. Trend...18°

Απόσταση από το δάπεδο στη βάση.....8,9 cm

Διάσταση τροχών.....20,3 cm



**Τοποθέτηση ακτινογραφιών κα' όλο το μήκος**



**Ενσωματωμένος Ζυγός**



**Ενσωματωμένος Μηχανισμός Μεταφοράς Στατό Ορόυ**



**Ενεργό Φρένο Χειρός**